


Association des composants

IMPORTANT : Associez les composants du système avant de les associer à l'application du médecin

- 1 Manchon à cuisse avec jambièrre.
Activation du mode Association de l'EPG : appuyez simultanément sur les boutons Plus et Moins sur chaque EPG. Le voyant d'état de l'EPG va clignoter en vert, jaune et rouge.
- 2 Si nécessaire, associez le capteur talonnier à l'EPG pour jambe.
Activation du mode Association du capteur talonnier : associez le capteur talonnier à un nouvel EPG en plaçant une batterie (CR2032) dans le capteur talonnier et en appuyant sur le capteur de pression, un voyant vert va clignoter pour confirmer l'activation du mode Association. Mettez l'EPG pour jambe en mode Association.

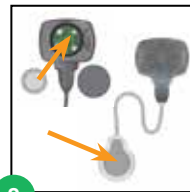

Association du système à l'application Programmeur du médecin Bioness

- 1 Connectez-vous à l'application Programmeur du médecin Bioness
- 2 Sélectionnez  pour accéder à l'écran Liaison. Placez le système en mode Association en appuyant simultanément sur les boutons Plus et Moins de l'EPG. Sélectionnez icône Liaison  située au-dessus de la jambe souhaitée. Une fois associé, quittez l'écran Liaison en cliquant sur .
- 3 Sélectionnez un patient, à savoir *Travailler avec le patient existant*, *Créer nouveau* ou *Choisir dans la liste*.
Si vous en sélectionnez un dans la liste de patients, appuyez sur icône de téléchargement  ou cliquez deux fois sur le nom de votre choix.



Fixation du système L300 Go

- 1 Fixez le panneau personnel.
- 2 Glissez la protection individuelle sanglée sur la jambièrre.
- 3 Essuyez la zone de stimulation avec un chiffon doux et sec. Tendez ensuite légèrement votre jambe.
- 4 Une fois les électrodes fixées à la jambièrre L300, placez la jambièrre sur la jambe en utilisant le localisateur de la rotule, fixez la sangle et réglez la tension.
- 5 Programmez les réglages de stimulation pour obtenir la réponse souhaitée.



Pour obtenir une liste complète de l'ensemble des contre-indications, avertissements, effets indésirables, précautions d'emploi et instructions d'entretien, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

L300 Go®, Bioness, le Bioness Logo® et LiveOn® sont des marques déposées de Bioness Inc aux États-Unis et dans d'autres pays. | www.bioness.com

Fixation du manchon à cuisse L300 Go autonome

- 1 Humidifiez les électrodes en tissu du manchon à cuisse et enclenchez-les dans le manchon.
- 2 Essuyez la zone de stimulation avec un chiffon doux et sec. Positionnez le manchon sur la cuisse, à une distance minimale de trois doigts de la fosse poplitée (application ischiojambiers) ou de la rotule (application quadriceps).
- 3 Centrez le manchon sur la ligne médiane de la cuisse. Serrez les sangles.
- 4 Paramétrez les réglages de stimulations lorsque le patient est en position assise afin d'obtenir la réponse souhaitée.
- 5 Si nécessaire, ajustez les réglages des stimulations lorsque le patient est debout.



Programmation du système L300 Go

- 1  Programmez les réglages de stimulation. Sélectionnez l'EPG souhaité dans le **tableau de bord Contrôle de la stimulation**. Sélectionnez le type d'électrode (écran Électrode directionnelle illustré). Invitez le patient à s'asseoir, puis appuyez sur **Test** pour activer la stimulation sur l'EPG sélectionné. Ajustez les réglages pour obtenir la réponse souhaitée. Appuyez sur **Test** pour stopper la stimulation. Répétez cette étape pour tous les EPG connectés.
- 2  Programmez les réglages de marche. Appuyez sur l'icône **Écran Marche**. Appuyez sur l'icône **Onde de stimulation** pour activer le mode Marche. Observez la marche du patient et ajustez les réglages, le cas échéant. Appuyez sur l'icône **Onde de stimulation** pour stopper la stimulation.
- 3  Programmez les réglages d'entraînement. Appuyez sur l'icône **Écran Entraînement**. Ajustez les réglages d'entraînement, en incluant ou pas un EPG spécifique, comme souhaité. Appuyez sur l'icône **Entraînement** pour activer la stimulation sur tous les appareils associés inclus dans le mode Entraînement. Appuyez sur l'icône **Entraînement** pour stopper la stimulation.
- 4 À la fin de chaque session, déconnectez le système en accédant à l'écran **Liaison** et en appuyant sur l'icône **Déconnecter**. Quittez l'application du médecin.

Remarque : appuyez sur l'icône Stimulation manuelle et maintenez-la enfoncée pour activer la stimulation sur tous les EPG associés et actifs pendant que vous appuyez sur le bouton.



Bioness, Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Téléphone : 800.211.9136
E-mail : info@bioness.com
Site Web : www.bioness.com



bioness
A Bioventus Rehab Company

612-00866-001 Rev. E 12/2022