


Komponentparkoppling

VIKTIGT: Parkoppla systemkomponenter innan du parkopplar med appen för kliniska handläggare

- 1 Lårmanschett med underbensmanschett.
Aktivering av EPG-parkopplingsläge: Tryck samtidigt på plus- och minusknappen på varje EPG. EPG-statuslampan blinkar grönt, gult, rött.
- 2 Om det behövs parkopplar du fotsensorn med EPG för underbensmanschett.
Aktivering av fotsensorns parkopplingsläge: Parkoppla fotsensorn med en ny EPG genom att placera ett batteri (CR2032) i fotsensorn och trycka på trycksensorn. Den gröna lampan blinkar för att bekräfta aktivering av parkopplingsläge. Sätt EPG för underben i parkopplingsläge.

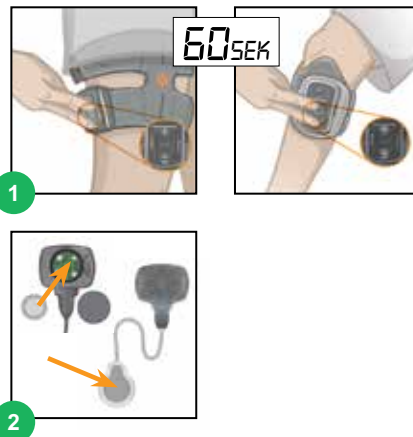

Parkoppla systemet med Bioness-appen för kliniska handläggare

- 1 Logga in i Bioness-appen för kliniska handläggare.
- 2 Välj  för att öppna länknings-skärmen. Sätt systemet i parkopplingsläge genom att samtidigt trycka på plus- och minusknappen på EPG. Välj  länkikonen ovanför önskat ben. När parkopplingen är klar stänger du länknings-skärmen genom att klicka på .
- 3 Välj en patient dvs. *Arbeta med befintlig patient, Skapa ny eller Välj från lista*. Om du väljer från Patientlistan trycker du på uppladdningsikonen  eller dubbelklickar på valt namn.



Påtagning av L300 Go-systemet

- 1 Sätt fast den personliga panelen.
- 2 Dra det personliga remskyddet över manschettremmen.
- 3 Torka av stimuleringsområdet med en fuktig, mjuk duk. Sträck därefter ut underbenet något.
- 4 När elektroderna har anslutits till L300-manschetten sätter du manschetten runt benet med hjälp av manschettens knäskålslokalisering, fäster remmen och justerar spänningen.
- 5 Programmera stimuleringsinställningar för att uppnå önskat svar.




En fullständig lista över alla kontraindikationer, varningar, biverkningar, försiktighetsåtgärder och skötselinstruktioner finns i användarhandboken.

L300 Go®, Bioness, Bioness-logotypen® och LiveOn® är registrerade varumärken som tillhör Bioness Inc. i USA eller i andra länder. | www.bioness.com

Påtagning av L300 Go Thigh Stand-Alone

- 1 Vät lårelektroderna av tyg och tryck in dem i manschetten.
- 2 Torka av stimuleringsområdet med en fuktig, mjuk duk. Placera manschetten på låret, minst tre fingerbredder ovanför knävecket (vid applicering på lårets baksida) eller knäskålen (vid applicering på lårets framsida).
- 3 Centrera manschetten på lårets mittlinje. Fäst remmarna.
- 4 Programmera stimuleringsinställningar med patienten i sittande för att uppnå önskat svar.
- 5 Vid behov, justera stimuleringsinställningarna med patienten i stående.

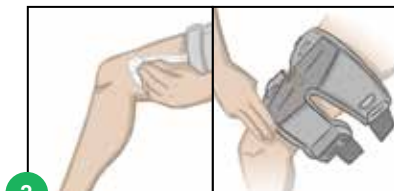

Programmera L300 Go-systemet

- 1  **Programmera stimuleringsinställningar.** Välj önskad EPG på manöverpanelen för stimuleringskontroll. Välj elektrodtyp (bilden visar skärmen för styrelektrod). Patienten ska sitta när du trycker du på  för att starta stimuleringen på vald EPG. Justera inställningarna för att uppnå önskat resultat. Tryck på  för att stoppa stimulering. Upprepa stegen för alla anslutna EPG-enheter.
- 2  **Programmera gånginställningar.** Tryck på gångskärmsikonen. Tryck på stimuleringsvågsikonen  för att aktivera gångläge. Observera patientens gång och justera inställningarna efter behov. Tryck på stimuleringsvågsikonen  för att stoppa stimulering.
- 3  **Programmera träningsinställningar.** Tryck på träningsskärmsikonen . Justera träningsinställningar, inklusive uteslutning av en specifik EPG efter behov. Tryck på träningsikonen för att aktivera stimulering på alla parkopplade enheter som ingår i träningsläge. Tryck på träningsikonen  för att stoppa stimulering.
- 4 I slutet av varje session kopplar du bort systemet genom att gå till länkningsskärmen  och trycka på bortkopplingsikonen . Avsluta appen för kliniska handläggare.

Obs! Håll ikonen för manuell stimulering  intryckt för att aktivera stimulering på alla parkopplade och aktiva EPG-enheter så länge knappen är intryckt.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355
Telefon: 800.211.9136
E-post: info@bioness.com
Webbplats: www.bioness.com



bioness[®]
A Bioventus Rehab Company